

# LIPOSOLVE

GLOBAL CONTOURING

riduce il  
**GRASSO**

contrasta la  
**CELLULITE**

rivitalizza la  
**PELLE**



**ÆSTHELAB™**  
BIOMEDICAL SYSTEMS & RESEARCH

# 4 TECNOLOGIE IN UNA



lift up

push up

## LIPOSOLVE

La rivoluzionaria piattaforma che implementa 4 tecnologie ospitate in 7 applicatori viso e corpo per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

- **MASSAGGIO ENDODERMICO**
- **MULTIVIBRAZIONE COMPRESSIVA**
- **RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE**
- **LASER LLT**

## TRATTAMENTO

Riesce a trattare sia il tessuto più profondo sia gli strati superficiali della pelle, con una considerevole riduzione degli strati adiposi, delle circonferenze e dell'aspetto della cellulite.

Liposolve , garantisce risultati sicuri e efficaci sia sul corpo che sul viso e su tutti i tipi di pelle. E' un trattamento da poter eseguire anche in estate o in stagioni fredde.



**LIPOSOLVE**  
GLOBAL CONTOURING



# MANIPOLI


## MANIPOLI SHAPE

Il massaggio endodermico è effettuato attraverso due rulli metallici motorizzati il cui senso di rotazione è liberamente controllabile sia dalla console che direttamente dal manipolo. Passando sulla superficie della pelle, il manipolo crea un'aspirazione pulsata e ritmica accompagnata da movimenti di arrotolamento e srotolamento: questo particolare movimento aiuta a stimolare la circolazione sanguigna e linfatica, andando in tal modo a contrastare i principali inestetismi correlati quali:


■ CELLULITE ■ STASI LINFATICA ■ GONFIORE ■ PELLE A BUCCIA D'ARANCIA



PRIMA DEL TRATTAMENTO

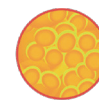

DOPO LLT

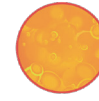


SVUOTAMENTO ADIPOCITI



Dal manipolo, mediante il display touchscreen, si controllano sia le modalità dei cicli di aspirazione che l'intensità. Inoltre, è possibile attivare le funzioni di Radiofrequenza e Infrarossi IR. Queste ulteriori tecnologie concorrono ad attivare la lipolisi delle cellule di grasso favorendo lo svuotamento degli adipociti e il rassodamento dei tessuti, attraverso la stimolazione dei fibroblasti e il rafforzamento delle fibre collagene.

## MANIPOLI VFACE

Il trattamento di radiofrequenza bipolare con vacuum sul viso opera un profondo ringiovanimento del derma stimolando la produzione di fibre di collagene. L'azione congiunta del vacuum aumenta la stimolazione della circolazione già indotta dal calore della radiofrequenza, con conseguente maggiore apporto di ossigeno ai tessuti e smaltimento delle tossine. Il vacuum ha anche una azione di stimolazione del sistema linfatico.

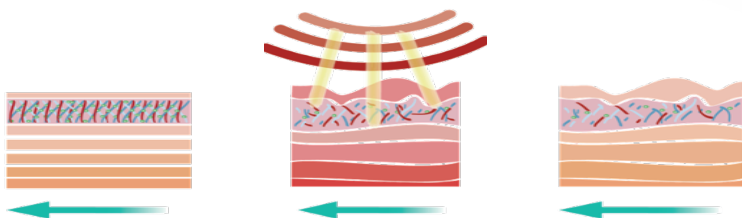


La pelle risulterà quindi visibilmente più tonica, più distesa, più compatta sia superficialmente che profondamente grazie alla contrazione delle fibre di collagene indotta dal calore.


## MANIPOLI ROLLER

La microvibrazione compressiva è un trattamento non invasivo che tramite un manipolo rullante composto da diverse sfere, genera delle microvibrazioni che vanno ad agire sulle cause principali della cellulite:

■ STASI LINFATICA ■ AGGREGAZIONE DI CELLULE ADIPOSE ■ INFIAMMAZIONE

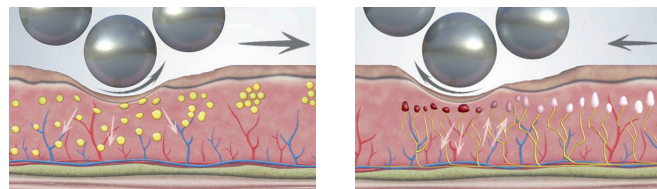

Infatti, la rotazione del rullo su se stesso induce le sfere a lavorare sulla cute in una particolare sequenza pulsata che determina un effetto di “pompa linfatica” che elimina i liquidi in eccesso. Inoltre, la microvibrazione compressiva agisce efficacemente sui recettori che regolano il dolore riducendo la risposta infiammatoria.

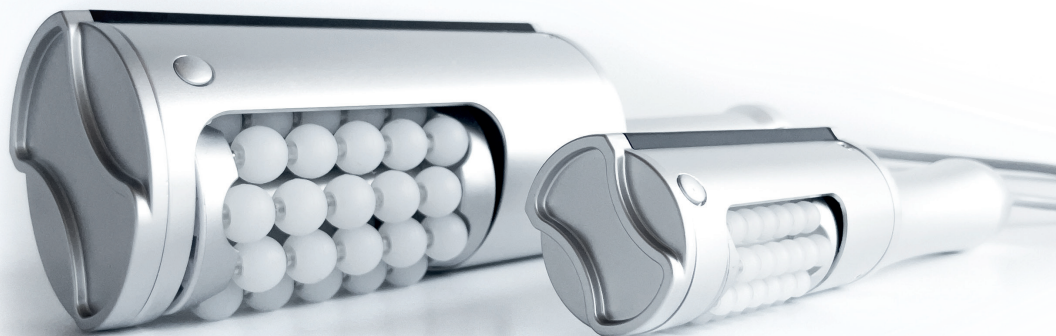

# LIPOSOLVE

GLOBAL CONTOURING



## SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY: 12" TOUCH SCREEN

DISPLAY MANIPOLO: 4.3" TOUCH SCREEN

PRESSIONE MANIPOLO VACUUM GRANDE: 30-90 kPa

PRESSIONE MANIPOLO VACUUM PICCOLO: 10-60 kPa

VELOCITÀ ROTOLAMENTO MANIPOLO GRANDE / PICCOLO: 500/450 rpm

MODALITÀ ROTOLAMENTO: AVANTI / INDIETRO / INTERNO / ESTERNO

MODALITÀ VACUUM: 1 PROGR. CONTINUO - 3 PROGR. PULSATI

FREQUENZA RF: 1MHz

LUNGHEZZA D'ONDA LIPOLASER: 760nm

POTENZA LIPOLASER: 10mW

ASSORBIMENTO: 1200W







# mesofill

## PRODOTTI DI CORREDO

Olii leggeri specifici per trattamenti di massaggio endodermico. Scorrevoli, non untuosi, facilitano lo svolgimento del trattamento e ne esaltano la performance. Formulati con miscele di olii ricchi di Acidi Grassi Polinsaturi Omega 3 e 6- studiati per una perfetta idratazione e veloce assorbimento dall'epidermide. La pelle risulterà idratata ma non untuosa e l'applicazione del manipolo risulterà scorrevole e più incisiva



# LIP SOLVE

GLOBAL CONTOURING



Prima Trav. Pisciarelli, 1B  
80078 Pozzuoli (NA) - Italy • +39 081 762 15 83  
[info@aesthelab.com](mailto:info@aesthelab.com) • [www.aesthelab.com](http://www.aesthelab.com)



MAGISTRA ANTIAGING  
MEDICAL ACADEMY

Tutto il materiale contenuto nella brochure è soggetto a copyright.  
Qualsiasi riproduzione completa o parziale non è concessa.